

腹臥位クッション

—S・P・C—

アニマル U-2

- Small-size
- Large-size

軽量コンパクトで
手軽に四つ這い姿勢が取れます。



使い方色々、 腹臥位クッション。

アニマル

U-2

使用方法

- クッションの鼻部に顔を載せるようにして、身体を乗せてください。
- 両サイドの耳のアールで身体を支えることで、安心して四つ這いくらいを取ることができます。
- クッションの鼻を取り外すことで、頭部が下がり排痰がしやすくなります。また、頭部の伸展を促し、首のコントロールを訓練することができ、手と目の連動した活動ができます。
- クッションの鼻を移動することで、身体の変形に対して頭部の支えの位置が変えられます。

—S.P.C—



特徴

- ALL樹脂コーティングでウレタンのクッション性はそのままに、防水性と、耐久性がアップしました。
- 特殊塗料仕上げなので、オーダーカラーにも対応できます。
- クッションの鼻は別注オーダー可能で、気管切開などにも対応できます。

取扱い上の注意

- ALL樹脂コーティングではありますが、浴槽内・プールでは使用しないでください。
- 水洗い・アルコール消毒後は乾いた布で拭き乾燥させてください。
- タバコ・ライター・ストーブなどの火気には、近づけないでください。

■サイズ

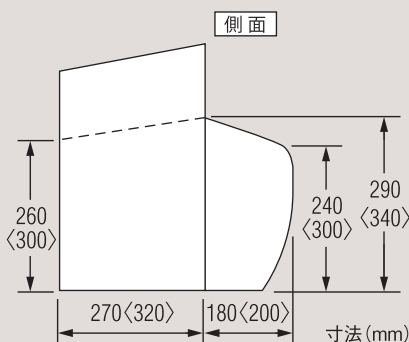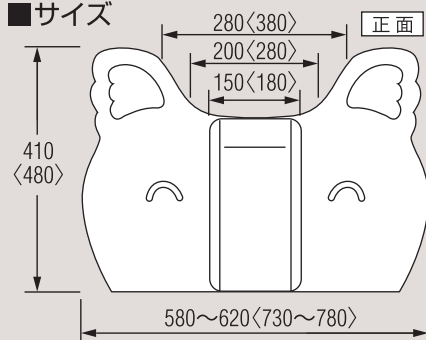

サイズ：スモールサイズ H410×(580~620)×450
 ラージサイズ H480×(730~780)×520
 中 材：ウレタンフォーム
 コーティング材：ウレタン樹脂(無溶剤型)
 着 色：2液型ポリウレタン樹脂塗料
 適応年齢：6歳~15歳(10歳~18歳)

※〈 〉はラージサイズです。

予告なく変更されることがあります。

SEDIA www.sedia-info.jp

株式会社 シラエ 埼玉営業所 **SEDIA**

〒352-0011 埼玉県新座市野火止3-9-5

TEL:048-483-4191 FAX:048-483-4192

E-mail:sedia@sedia-info.jp

■取扱店

2018年1月